ROOTT

ROOTT S

ИМПЛАНТАТ ROOTT S ПРОТОКОЛ УСТАНОВКИ

от открытия упавковки до установки имплантата

1 Возьмите упаковку и откройте ее.






2 Извлеките блистер.







3 Аккуратно откройте блистер.



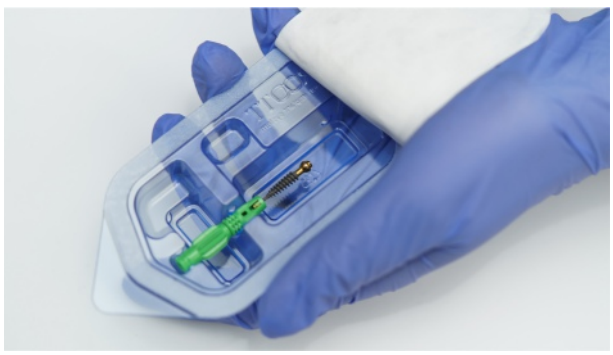


4 Извлеките имплантат с помощью зеленого держателя.

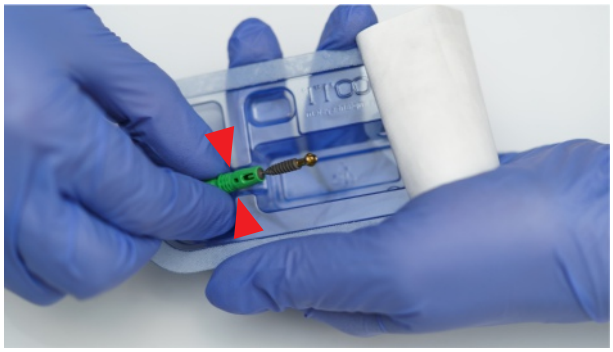

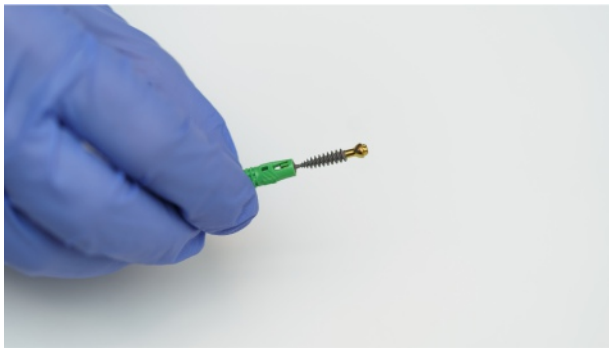

5 Возьмите имплантовод S и установите на имплантат. Зафиксируйте инструмент винтом (винт входим в комплект с имплантоводом). Убедитесь, что инструмент надежно зафиксирован. Используйте имплантовод ITMS/ITMSL/ITMSXL.

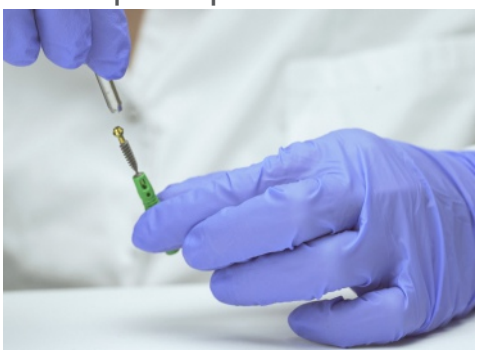







6 Отсоединение имплантата от платформы допускается двумя способами:

a) Крепко держите инструмент одной рукой, а другой возьмитесь за держатель, поворачивая его до тех пор, пока имплантат не отсоединится от платформы.

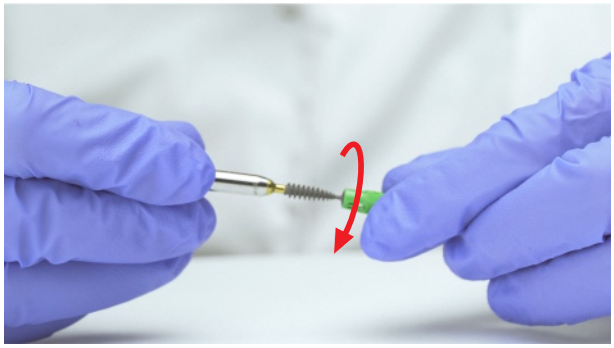

b) Крепко держите инструмент одной рукой, а другой возьмитесь за держатель и отломите его.

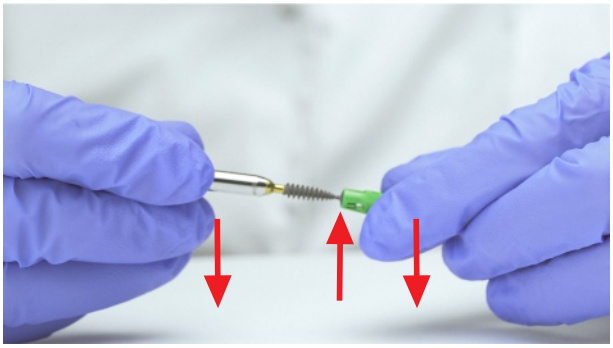

7 После скручивания или перелома имплантат отделяется от платформы.



8 Немедленно вставьте имплантат в подготовленное ложе с помощью имплантовода S. Используйте имплантовод ITMS/ITMSL/ ITMSXL для ратчета TW50 или TW70. При установки имплантата максимально возможная нагрузка (торк) 133 Нсм.





9 Имплантат установлен.

